

# アイソレーション陰圧チェンバー

モデル(O2ONE M-5)

## 感染症対策として


素早く・簡単に  
感染患者の隔離



箱から取り出して  
広げるだけ



HEPAフィルター  
で汚染された空気を浄化

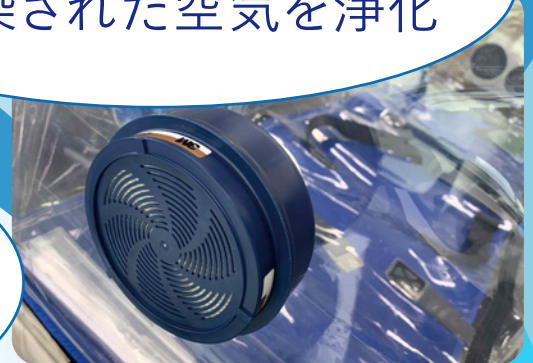

**-40Pa**

まで設定可能



カラーLCD画面  
通常の操作や表示が  
わかりやすい



手動または自動で  
圧力設定ができる  
さまざまな状態や変化に対応  
することができる

耐久性に優れた  
ニトリルグローブ  
交換も簡単

## 製品の特長


**-40Pa**  
まで設定可能

### ■ 簡単設置

箱から取り出して広げるだけですぐ使用できます。

### ■ HEPAフィルター

3M社製(CE取得)のフィルターを3個装着。  
汚染された空気を浄化し、外へ排出。

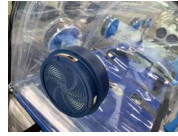

CE



### ■ 出入りが楽

丈夫なYKK社製ファスナー使用。開閉も楽。

### ■ 充電式電池の使用

DC電源から作動・充電します。フル充電で約9時間使用できます。

### ■ 2つのモードの圧力設定

#### Manual mode

作動中に  
圧力の変更可能



#### Auto mode

設定圧力に合わせ  
自動的に運転



現在の圧力と設定圧力を表示

### ■ ニトリルグローブ

耐久性に優れたニトリルグローブを使用。  
取り外しが簡単で、交換しやすい。

## 仕様

- 製品名 : アイソレーション陰圧チェンバー (モデル O2ONE M-5) 韓国製
- サイズ : 幅 1950 x 奥行 580 x 高さ510 (mm) 騒音 :  $\geq 65$ dB
- 重量 : 約25kg (梱包時重量 約26Kg 箱サイズ:L690×W650×H730mm)
- 集塵効率: HEPAフィルター(3M社製 3個装着) 集塵効率  $0.3\mu\text{m}$ 以上粒子 99.95%
- 空気流量:  $67\pm 10\%$  (常時喚起)
- 排気 :  $\geq 50\text{L}/\text{min}$  (2個フィルター)
- 圧力設定:  $-10\text{Pa} \sim -40\text{Pa}$ の範囲で設定(自動モードと手動モード)
- アラーム機能付き ( $-15\text{Pa} \sim -3\text{Pa}$ )
- 電源 : 100V 50/60Hz(DC12V)
- 充電電池 : フル充電で約9時間作動

※ 本チェンバーは医療機器ではありません。  
※ 性能改良のために使用などは変更することがあります。

**YKC** Youthfulness  
Kindness  
Collaboration

株式会社YKC

〒102-0076 東京都千代田区五番町12-4-402

TEL: 03-3239-8431 FAX: 03-3239-8432

E-mail: mail@ykcgroup.com

www.ykcgroup.com